

Il Termometro Ideale in Ambito Pediatrico

TraxIt®

Cura continua per ogni piccolo paziente

Medical Indicators è il produttore leader nel settore dei termometri monouso per uso medicale, rinomato per fornire le misurazioni della temperatura più accurate disponibili oggi sul mercato.

I nostri prodotti sono monouso/per singolo paziente, progettati per aiutare le principali strutture sanitarie, come ospedali e sistemi sanitari nazionali, a ridurre l'incidenza delle infezioni nosocomiali.

Con una forte attenzione alla cura pediatrica, il nostro termometro per il monitoraggio continuo è progettato per soddisfare le esigenze specifiche dei giovani pazienti, garantendo precisione e comfort..

Perché scegliere TraxIt®?

Progettato per il monitoraggio continuo della temperatura per 48 ore, TraxIt® offre un rilevamento accurato e delicato della temperatura dei bambini, riducendo al minimo i disagi.

Estremamente precisa: precisione clinica entro ±0,1 °C

Delicato e sicuro: clinicamente testato per bambini dai 6 mesi in su; non irrita la pelle sana

Design superiore: adesivo di grado medicale, impermeabile, non realizzato con lattice di gomma naturale, leggero e compatto

Comodo: non sono necessarie batterie, cavi, coperture per la sonda o prodotti per la pulizia

Ecologico: 182% di rifiuti in meno rispetto alle alternative

Durata di conservazione prolungata: utilizzabile fino a 5 anni

Opzioni versatili: disponibile in gradi Celsius e Fahrenheit

Controllo delle infezioni: il design monouso garantisce l'igiene

Certificazioni: marchio CE 2797, dispositivo FDA di Classe I e certificato UKCA

L'opzione ecologica

Siamo orgogliosi di ridurre la nostra impronta di carbonio, creando al contempo prodotti ecocompatibili con una precisione insuperabile, il massimo controllo delle infezioni e bassi costi di gestione.

Chilogrammi di rifiuti per letto

- Ospedale con 100 posti letto, che genera 100.000 misurazioni della temperatura corporea all'anno.
- Il calcolo dei rifiuti tiene conto dei termometri, delle coperture delle sonde e delle batterie.



Facile da usare, progettato per aiutare pediatri, infermieri e genitori.



È sufficiente estrarre il termometro dalla confezione e posizionarlo nella parte alta dell'ascella del paziente.



Chiudere il braccio e attendere tre minuti per la prima lettura della temperatura.

Dopo la prima misurazione, un semplice sollevamento del braccio fornirà una lettura istantanea e clinicamente accurata della temperatura per 48 ore consecutive, anche durante il sonno, il cambio d'abiti e persino il bagno.



Tecnologia Affidabile, Precisione Senza Compromessi

Tecnologia a Cristalli Liquidi™ TraxIt®


I termometri di Medical Indicators utilizzano un sistema chimico innovativo e brevettato – Precision Phase Change Technology (PPCT) – per misurare la temperatura corporea in modo sicuro e accurato. La tecnologia PPCT è impiegata in una matrice di punti composta da cristalli termosensibili.

Questi cristalli contengono una formulazione chimica unica, progettata per reagire, ovvero cambiare colore, a una temperatura specifica.

- I termometri TraxIt® hanno una precisione di ± 0,1 °C
- I punti si attivano a una temperatura formulata su misura
- I colori cambiano dal verde al nero
- L'ultimo punto nero fornisce la lettura precisa della temperatura
- Può essere smaltito come rifiuto generico.
- Conservare a temperatura inferiore a 30°C

Oltre a questa straordinaria innovazione, i nostri termometri vengono sottoposti a test di precisione in due fasi durante tutto il processo di produzione, per garantire il rispetto dei requisiti degli standard di collaudo riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Utilizziamo bagni termostatici di precisione per confermare l'accuratezza e l'affidabilità dei nostri prodotti e conduciamo test di routine nel nostro stabilimento di produzione certificato FDA e ISO.

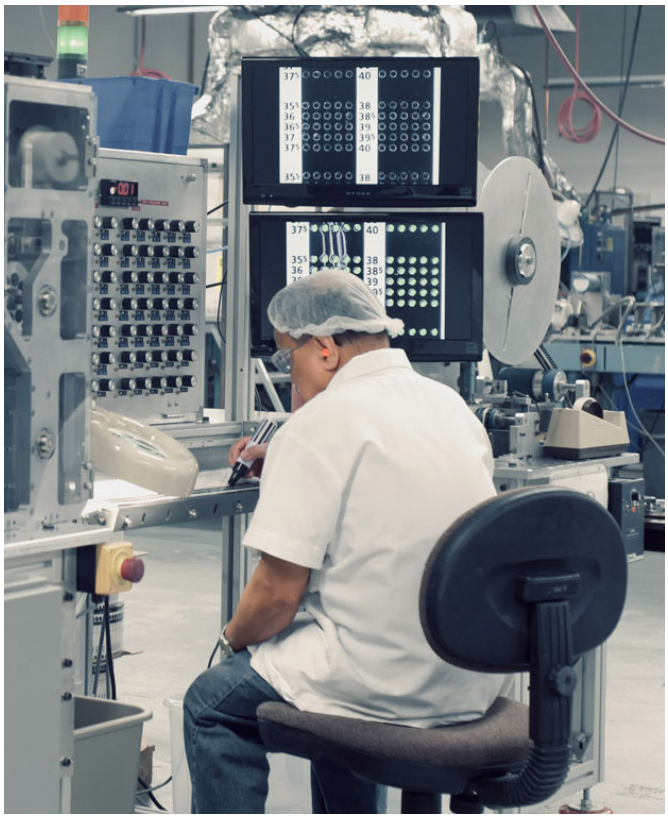

Tutto ciò ci permette di offrire agli utenti la tranquillità di sapere che i termometri Medical Indicators sono sicuri, affidabili e precisi.

Prestazioni Superiori ai Termometri Tradizionali

Prodotto americano
Siamo orgogliosi di produrre tutti i nostri termometri negli Stati Uniti.

Precisione insuperabile
Precisione ai massimi livelli del settore grazie alla Liquid Crystal Technology.

Ecologico
182% di rifiuti in meno rispetto ai termometri riutilizzabili.

Conveniente
Consente un risparmio annuo di oltre il 95%, senza costi aggiuntivi per batterie, coperture o pulizia.

Garantire il controllo delle infezioni
I termometri monouso eliminano il rischio di contaminazione incrociata.

	Indicatori medici Termometri	Timpanico	Electronico	Temporale	Infrarossi
Precisione	±0.1°C	±0.3°C	±0.2°C	±0.1°C	±0.3°C
Peso	<0.14g	595g	383g	212g	411g
Batterie	Non sono necessarie batterie	(3) AAA Batterie	(4) AA Batterie	(1) 9-Volt Batteria	(2) AAA Batterie
Ulteriori Accessori	Non sono necessari accessori aggiuntivi	Sì: cavi, copri-sonda, prodotti per la pulizia, pezzi di ricambio	Sì: cavi, copri-sonda, prodotti per la pulizia, pezzi di ricambio	Sì: cavi, copri-sonda, prodotti per la pulizia, pezzi di ricambio	Sì: prodotti per la pulizia, pezzi di ricambio
Calibrazione	Nessuna calibrazione necessaria	Deve essere calibrato ogni 6-8 settimane per mantenere la precisione.	Deve essere calibrato ogni 6-8 settimane per mantenere la precisione.	Deve essere calibrato ogni 6-8 settimane per mantenere la precisione.	Deve essere calibrato ogni 6-8 settimane per mantenere la precisione.
Convenienza	Leggeri, compatti e facili da trasportare; confezionati singolarmente per garantire sicurezza e igiene.	È necessario trasportare il termometro e gli accessori; è necessaria una custodia per il trasporto sicuro oppure il dispositivo deve essere pulito prima dell'uso dopo il trasporto per garantirne la pulizia	È necessario trasportare il termometro e gli accessori; è necessaria una custodia per il trasporto sicuro oppure il dispositivo deve essere pulito prima dell'uso dopo il trasporto per garantirne la pulizia	È necessario trasportare il termometro e gli accessori; è necessaria una custodia per il trasporto sicuro oppure il dispositivo deve essere pulito prima dell'uso dopo il trasporto per garantirne la pulizia	È necessario trasportare il termometro e gli accessori; è necessaria una custodia per il trasporto sicuro oppure il dispositivo deve essere pulito prima dell'uso dopo il trasporto per garantirne la pulizia
Impermeabile	YES	NO	NO	NO	NO
Pulizia richiesta	No; una volta utilizzato, il termometro va gettato nei rifiuti generici; in questo modo si elimina praticamente il rischio di trasmissione di infezioni.	Sì; è necessario utilizzare le coperture per la sonda e pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo per prevenire la diffusione di infezioni.	Sì; è necessario utilizzare le coperture per la sonda e pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo per prevenire la diffusione di infezioni.	Sì; è necessario utilizzare le coperture per la sonda e pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo per prevenire la diffusione di infezioni.	Sì; è necessario utilizzare le coperture per la sonda e pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo per prevenire la diffusione di infezioni.
Prevenzione delle perdite	Perdita di capitale minima	Perdita di capitale significativa	Perdita di capitale significativa	Perdita di capitale significativa	Perdita di capitale significativa
Frangibile	NO	SI	SI	SI	SI





Codice	Taglio	Descrizione
2313	100 termometri	TraxIt Celsius
2313-12	12 termometri	TraxIt Celsius

VEDI QUANTO È FACILE DA USARE

MINIAS

Distribuito in Italia da

MINIAS GLOBE DIAGNOSTICS SRL

Via Ancona 11R - 17100 Savona | Tel. 019/824844 - Fax. 019/829481

Email: info@minias.it

16 Thomas J. Rhodes Industrial Drive, Hamilton, NJ 08619, USA

www.medicalindicators.com

MKT-105-00

TraxIt®

MEDICAL INDICATORS